

Un singur sistem - două abordări:

Standard

Pentru nuanțele Vita® Clasic,
în două minute


Culori standard: cea mai ușoară modalitate de a obține o restaurare protetică clasică Vitapan®



L-N Neutral L-A pentru formă L-B pentru formă L-C pentru formă L-D pentru formă

Culori avansate: dezvoltați-vă latura artistică

Individualizează coroana și puntea protetică pictând puncte albe, decalcifieri, linii fine și fisuri. Poți folosi Lustre Pastes NF pentru a personaliza dinți artificiali de porțelan.

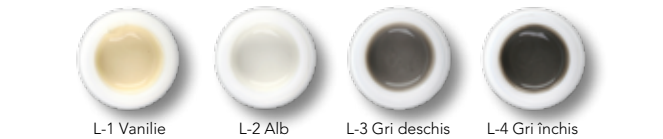

L-1 Vanilie L-2 Alb L-3 Gri deschis L-4 Gri închis



L-5 Albastru deschis L-6 Albastru închis L-7 Incizal *L-8 Olive *L-V Nuanță pentru luminozitate

Aceste culori conferă aspectul de dinți naturali datorită gradului lor ridicat de fluorescență.


Caracteristici tehnice

- 'GC.'** Doar o singură trusă compatibilă cu gama ceramică completă GC Initial
- 'GC.'** CTE cu valori optime - între 6,9 și 13,3 pentru a putea lucra cu aproape toate tipurile de metal
- 'GC.'** Paste îmbunătățite cu proprietăți tixotropice speciale pentru aplicare ușoară și precisă
- 'GC.'** Disponibile în borcane gata de folosit pentru o aplicare convenabilă
- 'GC.'** Lichide de diluare și împropătare pentru a păstra consistența optimă până la sfârșit

* două culori adiționale disponibile: Olive pentru efectele de culori cu bază verde și Nuanță pentru a modifica luminozitatea.

Parametri optimi ai CTE pentru GC Initial IQ - Lustre Pastes NF

CTE

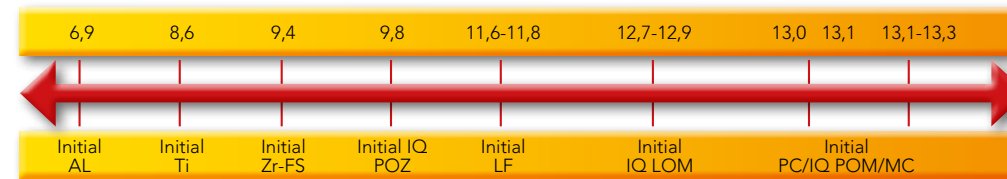

GC Initial IQ -
Setul Lustre Pastes NF

Ambalaj

Conținut:

- 1 x Neutral (4 g),
- 1 x Nuanță pentru luminozitate (4 g),
- 4 x Nuanțe pentru formă (4 x 4g),
- 8 x Nuanțe pentru efect de smalț (8 x 4 g),
- Lichid de diluare (8 ml),
- Lichid de împropătare (8 ml),
- 1 Placă pentru mixare,
- 2 Pensule,
- 1 Spatulă de sticlă pentru mixare,
- Instrucțiuni de folosire cu imagini



*Vita este marcă înregistrată a Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen.
Imagini: Michael Brusch-M.B.Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Germany

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Romania
BD. N. Balcescu, nr. 5C
bl. Dunarea 1, ap. 57, sect. 1
RO - Bucuresti
Tel. +40.21.315.93.15
Fax. +40.21.315.93.15
romania@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

Crează-ți propria lume
cu **Initial** de la **GC.**

Ceramică pentru orice indicație.

Pictează pentru estetică



Pastă
tri-dimensională
universală, ce conferă
profundime culorii și
translucență naturală
tuturor ceramicilor Initial.

**Initial IQ -
Lustre Pastes NF**
de la **GC.**

'GC.'

'GC.'

O singură pastă, multiple posibilități

Lustre Pastes NF sunt ceramici tri-dimensionale de machiaj, create pentru a îmbunătăți profunzimea culorii și transluțența naturală ale ceramicilor din gama Initial.

Deși dezvoltate pentru sistemele Initial IQ Press-over și Layering, Lustre Pastes NF pot fi folosite împreună cu întreaga gamă GC Initial, fiind compatibile atât cu ceramicile cu un CTE „scăzut”, cât și cu cele cu un CTE „ridicat”.

Lustre Pastes NF sunt disponibile în borcane gata de folosit, garantând întotdeauna o consistență optimă a pastelor datorită celor două lichide speciale pentru diluare și înprospătare.

Lustre Pastes NF are la bază particule fine de ceramică, ce permit aplicarea acestora într-un strat mai gros, obținând o vitalitate unică și o glazură naturală pentru toate restaurările protetice.

Doriți să lucrați mai repede și să vă concentrați pe construcția formei cu Initial IQ-One Body, Layering-over-Metal?

Cu Lustre Pastes NF puteți obține această iluzie în numai două minute.

Sunteți specialist în realizarea unei punți prin metoda wax-up?



Folosiți tehnicile Initial IQ- One Body, Press-over-Metal sau Press-over-Zircon, pentru a obține coroana sau puntea dorită. Cu Lustre Pastes NF puteți picta elementele caracteristice într-o etapă ulterioară.

Preferăți să realizați stratificarea coroanei și a punții prin metoda tradițională?

Dacă este necesar, puteți folosi Lustre Pastes NF ulterior, pentru a schimba culoarea, luminozitatea sau nuanța de gri, fără a mai fi nevoiți să reluați stratificarea pe o nouă coroană.

Finisare perfectă a restaurărilor protetice

Fie că folosiți GC Initial IQ - One Body, sistemele Press-over-Metal, Press-over-Zircon sau Layering-over-Metal, etapele de finalizare a coroanei și a punții protetice cu GC Initial - Lustre Pastes NF sunt mereu aceleași.

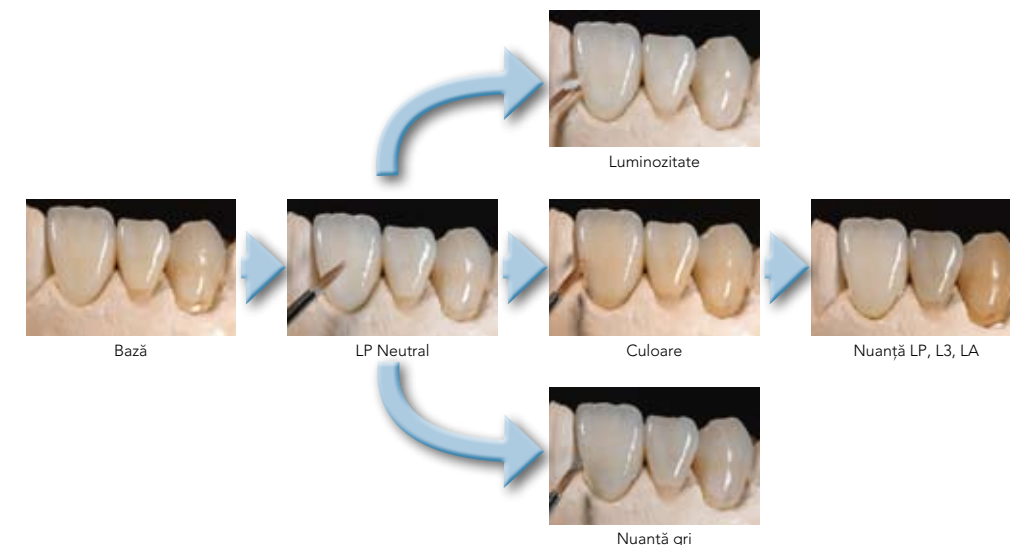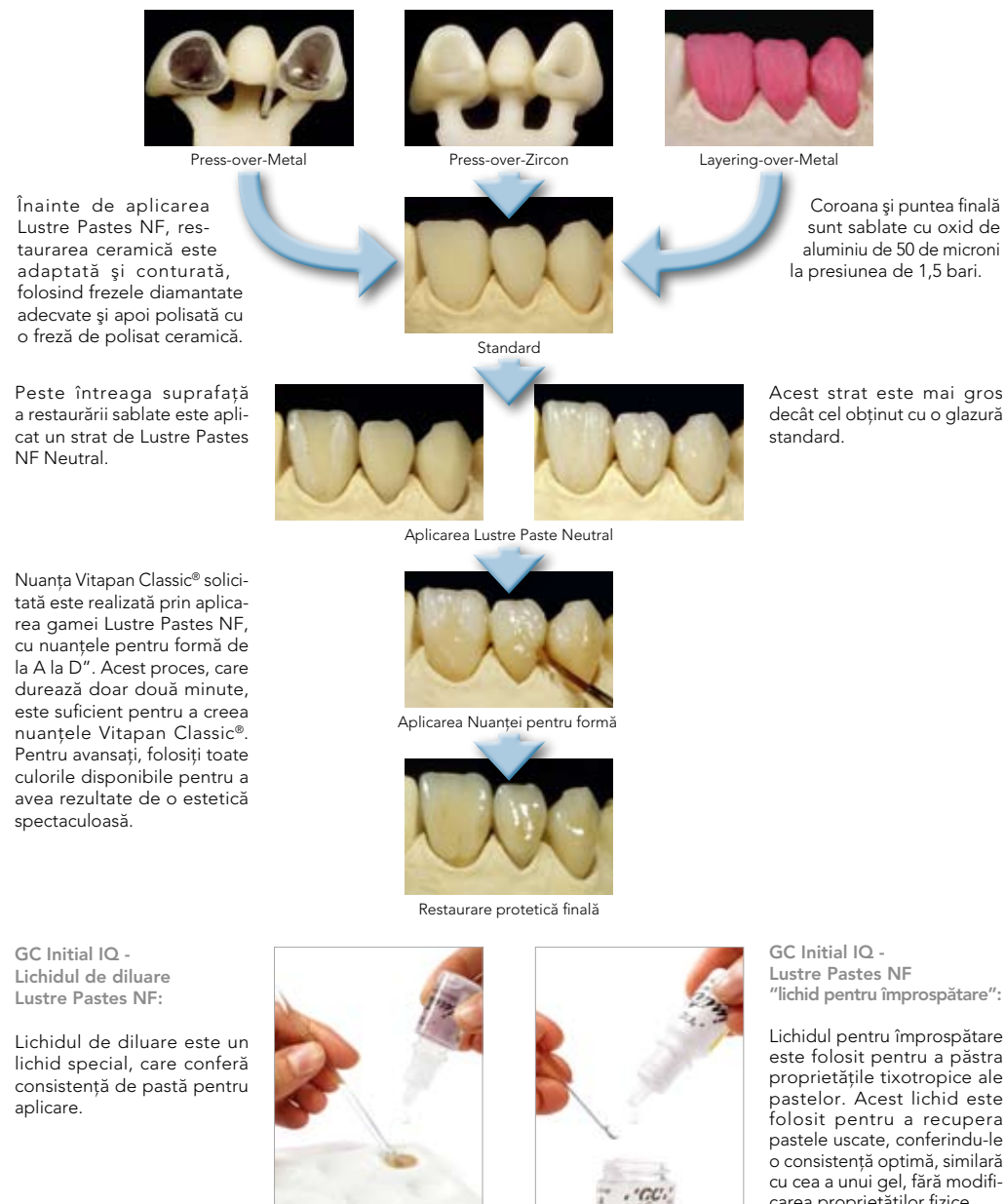

Cu Lustre Pastes NF poți modifica ușor coroana sau puntea ta din ceramică convențională. Modificarea luminozității, nuanței sau a culorii nu a fost niciodată mai simplă!



Obțineți cele mai bune rezultate prin utilizarea Lustre Pastes NF împreună cu tehnica cut-back la lucrarea presată sau stratificată. După ce pictați cu Lustre Pastes NF, tușele finale sunt realizate cu C-LF pentru mai multă transluțență și cu masele opalescente și incizale.